

機械器具 70 歯科用鑄造器
一般医療機器 歯科技工用形成器具 JMDN70760000

技工用インストゥルメントセレクトシステム

【形状・構造及び原理等】


○アルミハンドル




○シリコンハンドル



○ナイフ

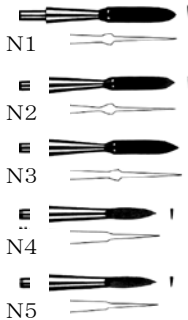

○ドロップオン

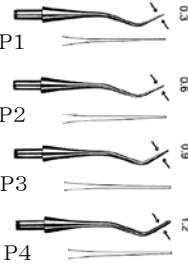

○スパチュラ




○カーバー




○スプーン



○ドロップオン

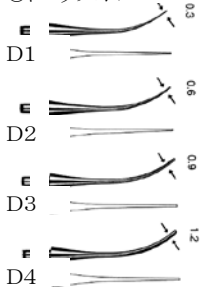


○ヒート

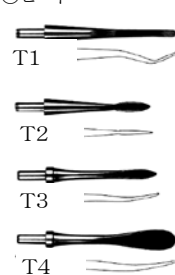

医大ヘラ

○カーバー

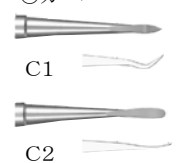

材質:ステンレス鋼、アルミニウム、シリコン

【使用目的又は効果】

歯科技工における彫刻形成、築盛を行う。

【使用方法等】

ハンドルを手指でしっかり固定し、先端部で歯科用ワックスの軟化、築盛、彫刻、形成を行う。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- ① 上記に定めた使用目的以外の目的で使用しないこと。また、破損、曲がり等の原因になり得るので必要以上の応力を加えないこと。

- ② 上記に定めた操作方法、使用方法を守り、それ以外には使用しないこと。
- ③ 破損や事故等の原因となるので、曲げ、切削、打刻等の2次加工(改造)は絶対に行わないこと。
- ④ 本品は、使用前に必ず患者の口腔外にて、汚れ、傷、曲がり、破損等、性能、使用目的上支障がないことを確認すること。
- ⑤ 腐食(錆)の原因となるので、次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポピドンヨード、ホルマリン、フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸性水、家庭用洗剤等は使用しないこと。
- ⑥ 腐食(錆)の原因となるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール・金ブラシ・ヤスリ等の鋼製工具を使用しないこと。
- ⑦ 本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた場合には、速やかに使用を中止し医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ① 本品は、湿度が高くない場所にて保管・管理する。
[錆を防ぐため]

【使用期間】

- ① 本品を使用中に破損又は汚染したおそれのある場合には、直ちに使用を中止し、新しいものと交換すること。

【保守・点検に係る事項】

- ① 「もらい錆」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品といっしょに収納・保管しないこと。
- ② 水分等付着した場合は、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず乾燥すること。
- ③ 使用前に、汚れ、傷、曲がり、破損等に異常がないか点検をすること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元・製造元 株式会社 シオダ
電話番号 0287-88-2288